


# エバーエックス フロー<sup>®</sup>

充填・支台築造用ファイバー強化型フロアブルコンポジットレジン


保険適用

ショートファイバー配合により象牙質に近い  
物性を有するデンチンリプレイス材料

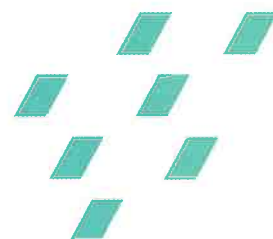

# Optimal Aspect Ratio(OAR)テクノロジー<sup>※</sup>により実現した デンチンリプレース材料


Optimal Aspect Ratio(OAR)テクノロジー<sup>※</sup>を駆使したショートファイバー配合による高い破壊靱性によりクラック伝播抑制作用を発揮することで、歯質や材料自体の破折リスクの低減が期待できます。

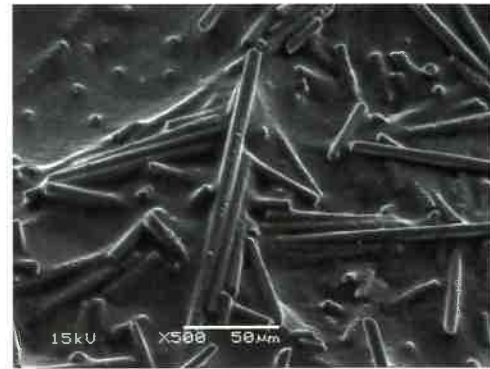

SEM画像提供: Lippo Lassila先生(University of Turku, Finland)

## ※Optimal Aspect Ratio(OAR)テクノロジーとは

アスペクト比(ファイバーの直径と長さの比率)の最適化により、高い破壊靱性と良好な操作性を両立するテクノロジー

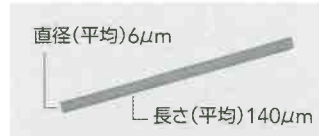

## コンポジットレジン充填、支台築造どちらにも使用可能

大きな窩洞形成による残存歯質が少ない症例でのコンポジットレジン充填や支台築造、CAD/CAM冠等の補綴時のライナー等にデンチンリプレース材料としてご使用いただけます。



残存歯質が少ないコンポジットレジン充填の症例 (写真提供: Rudolf Novotny先生(Slovakia))  
残存歯質が少ない支台築造の症例

▲エバーエックス フローが露出しないよう、表層に使用可能なコンポジットレジンもしくは最終補綴物で表面を覆ってください。





コンポジットレジン充填 支台築造

## 歯質や材料自体の破折リスクを低減

ショートファイバーの配合により、高い破壊靱性値および象牙質(デンチン)に近い弾性率を実現しました。歯質や材料自体の破折リスクの低減が期待できます。

### 破壊靱性試験


切れ込みを入れた試験片に徐々に力を加えた際の挙動試験。破壊靱性が高いと破折リスクが低減される。

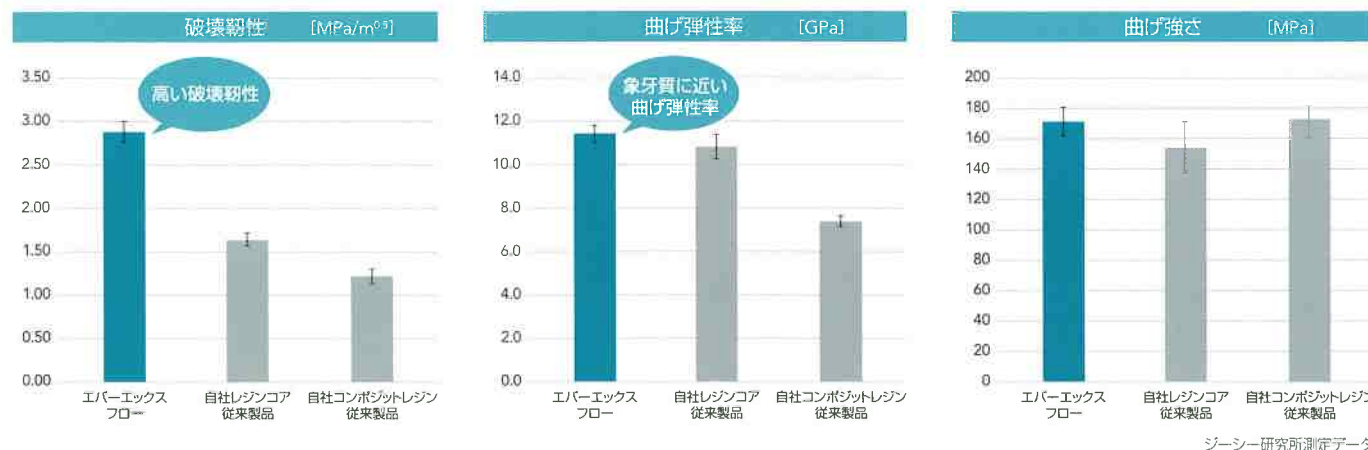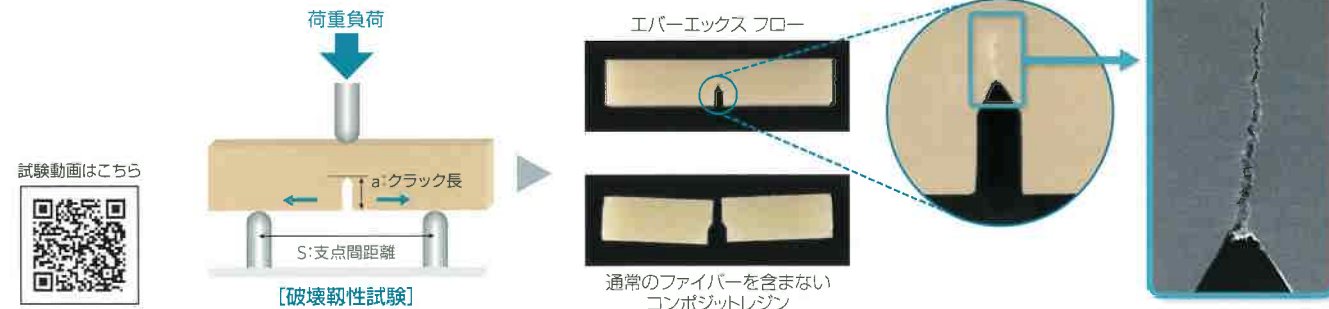

## 適切なチキトロピー性を付与した使いやすいペースト性状



**盛り上げやすい**  
シリンジから押し出したペーストは垂れずに形状を維持できるので、盛り上げにも適したペースト性状になっています。

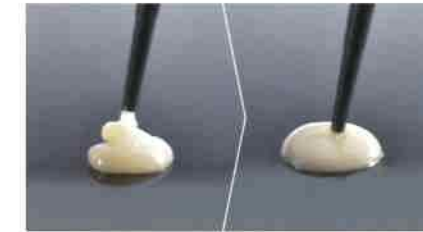

**窩壁に馴染みやすい**  
ペーストにチップの先で振動を与えると流動性が上がり、窩壁に馴染みます。

## 2つのシェードをラインナップ

シェード	照射時間 <sup>※</sup>	硬化深度
バルクシェード	10秒	5.5mm
デンチンシェード	20秒	2.0mm

深い窩洞や積層回数を減らして素早く充填したい場合に適した、バルク充填可能なシェード

審美性が求められる症例やセラミックス修復時のコアビルドアップに適した歯冠色シェード

※LED歯科重合用光照射器での照射時間(700 mW/cm<sup>2</sup>以上)

### 症例1 コンポジットレジン充填修復

写真提供: J.Tapia Guadix先生(スペイン)



### 症例2 支台築造(直接法)





充填・支台築造用ファイバー強化型フロアブルコンポジットレジン  
**エバーエックス フロー®**

色調●2色=バルク、デンチン  
 包装・希望医院価格●  
 1函(各色):シリンジ 3.7g (2.0mL) 1本、フィリングチップⅢ プラスチック3個、  
 フィリングチップ用キャップ1個、テクニクガイド1部=¥5,800



歯科充填用コンポジットレジン/歯科用支台築造材料  
 ジーシー エバーエックス フロー  
 管理医療機器 306AKBZX00025000



別売  
**フィリングチップⅢ  
 プラスチック**  
 包装・希望医院価格●  
 フィリングチップⅢプラスチック15個、  
 フィリングチップ用キャップ2個=¥1,290

**関連製品**

歯科充填用コンポジットレジン グレースフィルシリーズ **2mLシリンジ包装**



ナノハイブリッド充填用コンポジットレジン  
**グレースフィル ゼロフロー**  
 色調●9色=A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, U(ユニバーサル),  
 A02, A03  
 包装・希望医院価格●1包: 3.4g (2mL)入シリンジ1本  
 (フィリングチップ付)=各¥4,950  
 歯科充填用コンポジットレジン  
 ジーシー グレースフィル ゼロフロー  
 管理医療機器 229AABZX00014000



ナノハイブリッド充填用コンポジットレジン  
**グレースフィル ローフロー**  
 色調●9色=A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, U(ユニバーサル),  
 A02, A03  
 包装・希望医院価格●1包: 3.4g (2mL)入シリンジ1本  
 (フィリングチップ付)=各¥4,950  
 歯科充填用コンポジットレジン  
 ジーシー グレースフィル ローフロー  
 管理医療機器 229AABZX00013000



ナノハイブリッドフロアブルコンポジットレジン  
**グレースフィル フロー**  
 色調●9色=A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, U(ユニバーサル),  
 A02, A03  
 包装・希望医院価格●1包: 3.6g (2mL)入シリンジ1本  
 (フィリングチップ付)=各¥4,950  
 歯科充填用コンポジットレジン  
 ジーシー グレースフィル フロー  
 管理医療機器 229AABZX00051000



ナノハイブリッド一括充填用コンポジットレジン  
**グレースフィル バルクフロー**  
 色調●2色=ユニバーサル(U)、デンチン(D)  
 包装・希望医院価格●1包: 3.4g (2mL)入シリンジ1本  
 (フィリングチップ付)=各¥4,950  
 歯科充填用コンポジットレジン  
 ジーシー グレースフィル バルクフロー  
 管理医療機器 230AKBZX00066000



デュアルキュア型支台築造用接着性コンポジットレジン  
**ユニフィル® コアEM**  
 色調●1色=ユニバーサル  
 包装・希望医院価格●セット1函: EMカートリッジ20g  
 (10mL)1本, EMミキシングチップF 20個, EMミキシング  
 チップF用ノズルRC 20個, セルフエッチングボンドA液  
 (3mL)/B液(1.5mL)各1本, マイクロチップアプリケーター  
 (レッド)25本, チップホルダー1本, 採取皿1個=¥16,980  
 ※EMカートリッジ3本包装及び単品包装, セルフエッチング  
 ボンドA液(3mL), B液(1.5mL)各単品包装もあります。  
 歯科用支台築造材料 ジーシー ユニフィルコアEM  
 管理医療機器 220AKBZX000087000  
 製造販売元 株式会社ジーシー



デュアルキュア型支台築造用接着性コンポジットレジン  
**ユニフィル® コア**  
 色調●1色=ユニバーサル  
 包装・希望医院価格●セット1函: カートリッジペースト  
 (18g)2個, セルフエッチングボンドA液(3.0mL)1本,  
 セルフエッチングボンドB液(1.5mL)1本, マイクロチップ  
 アプリケーター(レッド)25本, チップホルダー1本, 採取皿  
 1個, 練和紙(No. 23)1冊, プラスチックヘラ1本, プラス  
 チックチューブⅡ No.1~No.4各1個=¥16,980  
 ※カートリッジ単品包装, セルフエッチングボンドA液  
 (3mL), B液(1.5mL)各単品包装もあります。  
 歯科用支台築造材料 ジーシー ユニフィルコア  
 管理医療機器 21300BZX00569000  
 製造販売元 株式会社ジーシー



支台築造用ファイバーポスト  
**ファイバーポスト**  
 種類●φ1.2, φ1.4, φ1.6(mm)  
 ※全長はすべて22mm  
 包装・希望医院価格●アソートメントキット1函:  
 ファイバーポスト φ1.2, φ1.4, φ1.6(mm) 各5本,  
 ファイバーポストドリル φ1.2, φ1.4, φ1.6(mm) 各1本  
 =¥24,000  
 1函10本=各¥10,000 1函20本=各¥17,800  
 ※ファイバーポストドリル単品包装,  
 φ0.8, φ1.0(mm)のファイバーポストNもあります。  
 歯科根管用ポスト成形品キット  
 ジーシー ファイバーポスト  
 管理医療機器 21700BZX00408000  
 単回使用(ファイバーポストのみ)



支台築造用ファイバーポスト  
**MIコア ファイバーポスト**  
 種類●φ1.2, φ1.4, φ1.6(mm)  
 ※全長はすべて22mm  
 包装・希望医院価格●  
 1袋20本=各¥12,540 1袋60本=各¥35,800  
 歯科根管用ポスト成形品  
 ジーシー MIコア ファイバーポスト  
 管理医療機器 228AABZX00047000  
 単回使用



※掲載情報とジーシー研究所の参考データは2024年8月現在のものです。  
 ※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。  
 ※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
 ※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

多目的光重合型1液性ボンディング材  
**G-プレミオ ボンド**  
 包装・希望医院価格●セット1函: G-プレミオ ボンド  
 (5mL)1本, ディスポーザブルアプリケーターⅡ 50本,  
 ディスポディッシュ 20枚=¥18,130  
 2本包装1函: G-プレミオ ボンド(5mL)2本=¥29,870  
 単品包装1函: G-プレミオ ボンド(5mL)1本=¥17,310  
 コードセット1函: G-プレミオ ボンド(0.1mL)50本,  
 ディスポーザブルアプリケーターⅡ 50本=¥20,600  
 歯科用象牙質接着材/歯科金属用接着材料/  
 歯科セラミックス用接着材料/歯科用知覚過敏抑制材料/  
 歯科用シーリング/コーティング材  
 ジーシー G-プレミオ ボンド  
 管理医療機器 226AABZX00098000



ナノハイブリッド充填用コンポジットレジン  
**ジーニアル アコード**  
 色調●14色=A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6, JE, AE,  
 BW, BW, A01, A02, A03  
 包装・希望医院価格●1包4.0g(2.1mL)1本, シリンジ1本  
 =¥3,710  
 歯科充填用コンポジットレジン  
 ジーシー ジーニアル アコード  
 管理医療機器 302AKBZX00096000

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシー デンタルプロダクツ**  
 東京都文京区本郷3丁目2番14号 愛知県春日井市鳥居松町2丁目285番地

カスタマーサービスセンター  
 お客様窓口 ☎0120-416480  
 受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)  
<https://www.gc.dental/japan/>

支店  
 ●東 京(03)3813-5751 ●大 阪(06)4790-7333  
 営業所  
 ●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722  
 ●東 北(022)207-3370 ●九 州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも  
  
 どちらもコチラのQRでOK!  
 推奨OSバージョンはiOS:14.0以上, Android:10.0以上です。