


歯科用ハンドピースメンテナンス装置



Lubrina 2

ルブリナ2

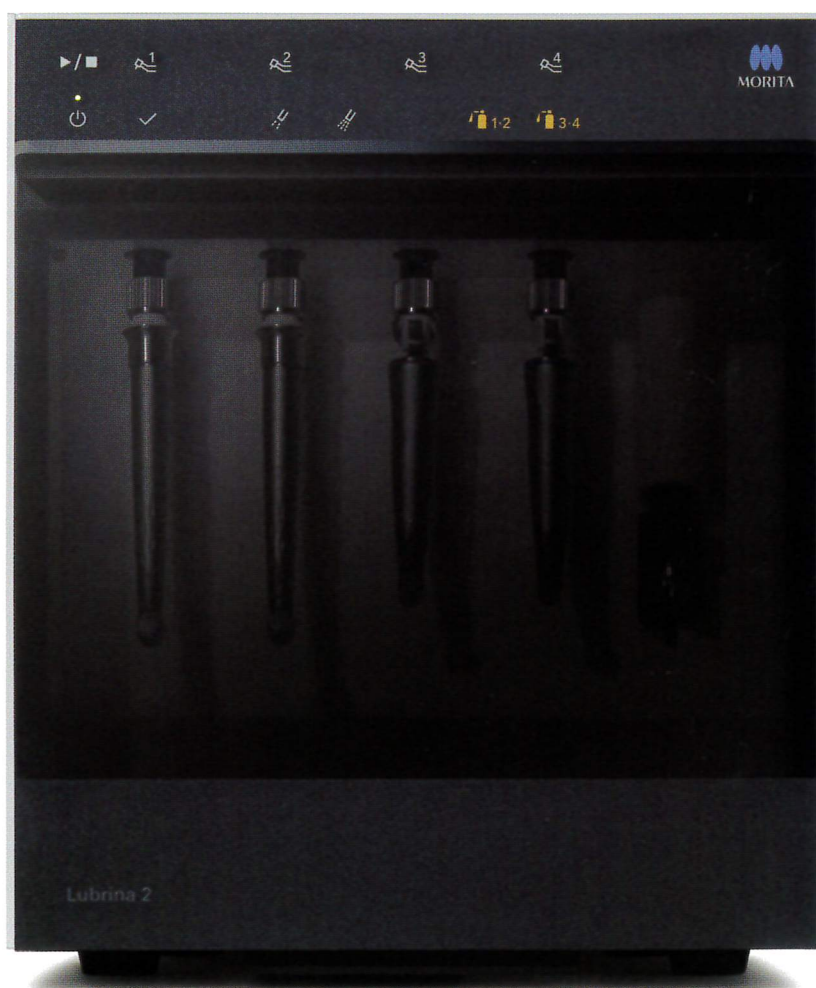

Thinking ahead. Focused on life.

Seamless Auto Maintenance

ハンドピースにもクリーンエアー


1本のタービンを20秒

オイル使用量は1/4

大幅な時間短縮とコストダウンを実現

クリーンエアブローシステムにより、クリーンなエアで残留水、オイルを徹底的に除去できるため、ヘッド内への注油効率が高まり、短時間でメンテナンスできます。使用するオイル量は手差しに比べ1/4まで低減しました。日々のメンテナンスコストを抑えることができます。*

メンテナンス工程を大幅に短縮

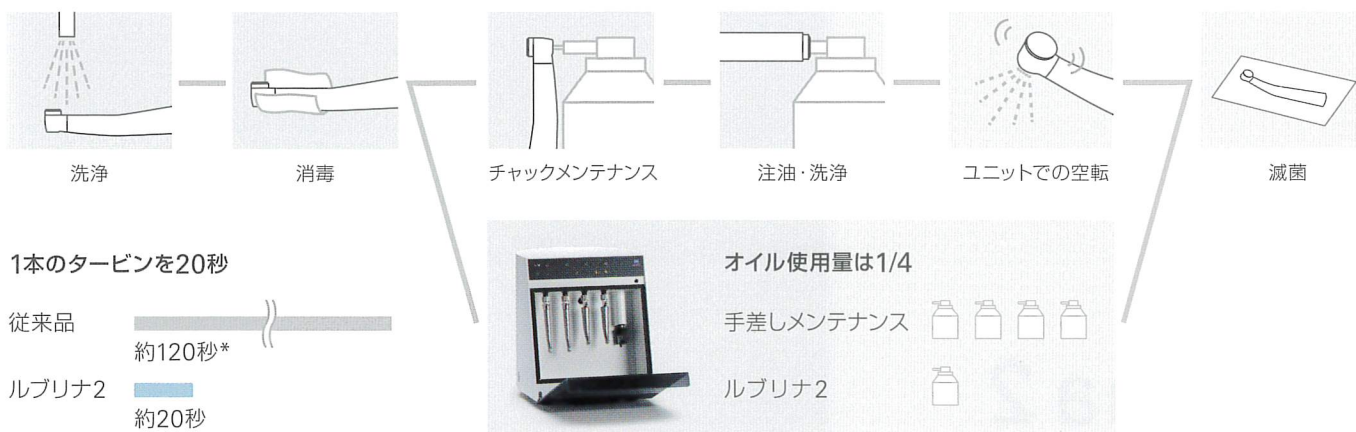


*当社従来品ルブリナのエクストラ フローモードとの比較

2管路設計でクリーンなエアを実現した

クリーンエアブローシステム


デュアル電磁弁の採用とクリーンエア専用管路により、オイルの混ざっていないクリーンなエアを供給することが可能です。注油前の水抜き作業ではヘッド内の水を除去し、注油時の浸透性を向上させます。また、注油後の余剰なオイルをクリーンなエアで除去しヘッド内の注油効率を向上させます。オイルが混ざっていないため、ハンドピース内の注水、チップエア管路にもクリーンなエアを供給でき、残留水による滅菌不良の低減にも貢献します。

ルブリナ2 (クリーンエアブローシステム)

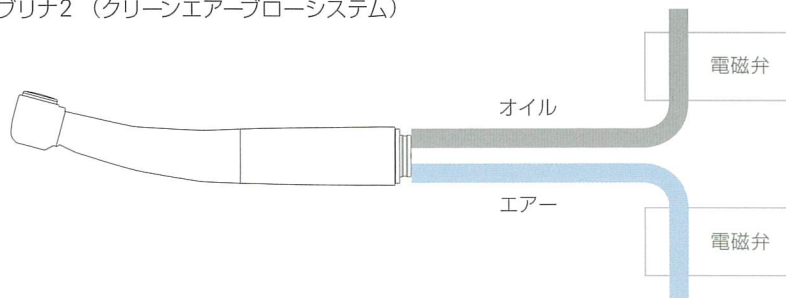

メーカーの異なるタービン、コントラを同時にメンテナンス

オプションのカップリング、スプレーホルダーを装着するだけで、メーカーの異なるタービン、コントラにもそれぞれ適したオイルでの注油メンテナンスが可能です。セットしたハンドピースに応じて2種類のモードから選択するだけで、簡単にメンテナンスが行えます。

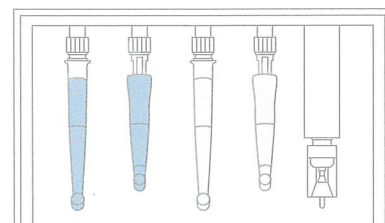

例：各社製 タービン1本・コントラ1本
モリタ製 タービン1本・コントラ1本

販売名：ルブリナ2 標準価格：230,000円(品目コード：201070495)

型式：HM2 電源電圧：AC 100V/240V 50-60Hz 消費電力：10.25VA 質量：約5kg 外形寸法：W300×D300×H365mm 最大入力エア圧力：0.7MPa max. 使用エア圧力：0.3-0.5MPa(推奨0.4MPa) 消費エア流量：60-100NL/min(0.3-0.5MPa) 法定耐用年数：5年
付属品：オイル吸収パッド、オイル吸収シート、フロントドア用オイル吸収シート、ドア用シートストッパー、電源コード、エアチューブ、スプレーホルダー(標準)×2(モリタ製スプレー用) ※本体にカップリングは付属していません。
ご使用に際しましては、製品の添付文書及び取扱説明書を必ずお読みください。仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。製品の色は印刷のため、実際とは異なる場合がございます。

発売 株式会社モリタ 大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-16 〒564-8650 TEL 06-6380-2525 東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-5513 TEL 03-3834-6101
製造販売 製造 株式会社モリタ製作所 本社工場 東京都京都市伏見区東浜南町6R0 〒612-8533 TEL 075-611-2141 久徳工場 京都府久世郡久御山町市田新塚域190 〒613-0022 TEL 0774-43-7594
お問い合わせ お客様相談センター TEL 0800-222-8020(フリーコール)