

# ジルコニア ニケイ酸リチウム 研削研磨 キャンペーン

2024 5/21 (Tue) ▶ 6/20 (Thu)

ジルコニアやニケイ酸リチウムの形態修整、  
仕上げ研磨におすすめの研削材を特別価格でご提供します。  
是非この機会にお求めください。

## 研削・研磨ステップを動画でご紹介

研削・研磨材には製品ごとにそれぞれ  
特長があり、作業にあったものを正しく  
選び、使い方を知ることで作業の効率化や  
品質の向上に繋がります。  
そこで、各ステップをわかりやすく  
ご紹介した動画を作成しました。  
是非、日々の作業にお役立てください。



### 研削材の 選び方

### 【形態修整】ビトリファイドダイヤモンド

#### カーボランダムポイント

消耗が早い



#### ビトリファイドダイヤモンド

より快適に!



研削力と滑らかさを兼ね備えた研削材を使用すれば  
消耗を抑制しつつ確実に削れます

### 形態修整に

### ビトリファイドダイヤモンド

ダイヤモンドポイントのような研削力を持ちながら、カーボランダムポイントのような滑らかな切削感。硬度の高いジルコニア、ニケイ酸リチウムをスムーズに研削していただけます。



CA 口腔内でも



HP 口腔外でも



### 仕上げ研磨に

### ジルコシャイン

ダイヤモンド砥粒を含有したゴム製研磨材。用途に応じてダイヤモンドの粒度が異なるコース、ミディアム、ファインを選択していただけます。



CA 口腔内でも



HP 口腔外でも



### 最終仕上げに ワックスタイプの ジルグロス

除去性、ブラシへの塗布性にすぐれた飛散しにくいワックスです。短時間でキズを取り、艶やかな表面性状に仕上がります。




HP



松風ピボットブラシを使用して研磨します

ジルコニア・ニケイ酸リチウム 鏡面研磨へ おすすめの研削・研磨ステップ

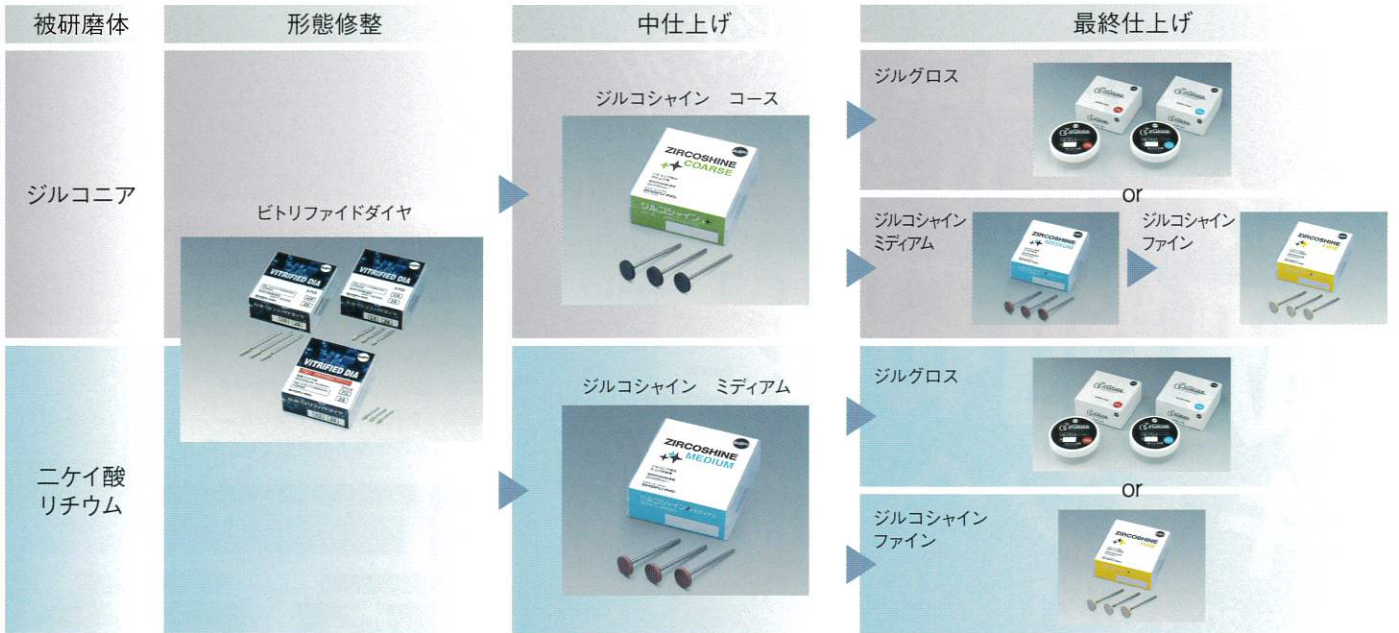

注文書 ジルコニア研削・研磨キャンペーン 2024年5/21(火)～6/20(木) \*表中の「-」はラインナップがございませんので、ご注文いただけません。予めご了承ください。

松風 ビトリファイドダイヤ 歯科用研削器材 一般医療機器 届出番号 26B1X00004000226

FG	-	-	-	箱	箱	-	-	-	-
CA	-	-	-	-	箱	箱	-	箱	-
HP	箱	箱	箱	-	箱	箱	箱	箱	箱
標準医院価格	2本¥4,500	2本¥2,900	3本¥4,500	3本¥2,900	3本¥2,900	3本¥2,900	3本¥2,900	3本¥2,900	2本¥4,500
特別医院価格	特別価格								

ジルコシャイン 歯科用ゴム製研磨材 一般医療機器 届出番号 26B3X00014000017

CAコース	-	-	箱	箱	-
CAミディアム	-	-	箱	箱	-
CAファイン	-	-	箱	箱	-
HPコース	箱	箱	箱	-	箱
HPミディアム	箱	箱	箱	-	箱
HPファイン	箱	箱	箱	-	箱
標準医院価格	3本¥3,300	3本¥3,300	4本¥3,300	3本¥3,300	1枚¥2,150
特別医院価格	特別価格				

ジルグロス 歯科用研磨器材 一般医療機器 届出番号 26B1X00004000269

20g	40g
個	個
¥10,500	¥14,000
特別価格	

貴医院名 / 貴技工所名

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

価格は2024年5月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご住所 〒

取扱い店

TEL.

株式会社マルヤマ歯科商店

弊社は、お客様からご提供いただきましたお名前、ご住所、お勤め先、お電話番号、メールアドレス等の個人情報を、今後弊社で開催するセミナーのご案内、並びに製品情報やキャンペーン情報、物品の送付、アンケートの実施に利用し、適切に管理いたします。その他、弊社における個人情報の取扱いについては、弊社プライバシーポリシーをご確認ください。