

特別
価格

コメット シンタードダイヤモンドディスク

LAB キャンペーン

期間
限定

2024

6.21▶8.20



ジルコニアのカットに シンタードダイヤモンドディスク HP

躊躇ない切れ味



ハイブリッドレジン

プロビジョナル、
レジンモックアップの形態修正



ノンプレシャス硬金属

Co-Cr 合金焼成後変形児での
蟻着用間隙作成

✓ シンタードダイヤとは？

表面のダイヤモンド粒子が剥がれても中から新しいダイヤモンド粒子が出てくるため、表面だけにダイヤモンド粒子を電着させたものより耐久性に優れ、高い切れ味が持続します

※写真は実物大ではありません



☎ 1入

| 品番 | #942-140 | #942-200 | #6942-200 |
|-------|--------------|--------------|------------|
| 粒度 | ミディアム(107μm) | ミディアム(107μm) | コース(151μm) |
| 直径 | 14.0 | 20.0 | 20.0 |
| 厚み | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| ダイヤ粒子 | 外周全体 | 外周全体 | 外周全体 |
| 適正回転数 | 25,000 | 15,000 | 15,000 |
| 価格 | 7,200円 | 10,200円 | 10,200円 |

製品動画はこちら



動画提供：
株式会社ていね社様(栃木県)

公式 SNS はじめました！

最新の情報をいち早くお届けします



Facebook



Instagram

FOLLOW ME!

医療機器の分類：一般医療機器
一般的名称：歯科技工用ダイヤモンド研削材
販売名：コメットダイヤモンドディスク
届出番号：2762x00391000009

株式会社マルヤマ歯科商店

LOVE THE JOB!

Pick up Item NO.4

100 years
of preparation
for tomorrow



ジルコニア・ニケイ酸リチウム・陶材用研削材 HP

適用材料：ジルコニア、アルミナ、プレスセラミック、陶材

マルチセラミック・グラインダー

ジルコニアをなめらかに切削

摩耗しにくく 長寿命

摩耗を抑制

結合剤
(セラミック)

研削材
(ダイヤモンド)

高い切削力をキープ

摩耗
しにくい

なめらかな
切削面

発熱を
抑制


多孔質形状
なので、

水分を含ませやすい

使用時のポイント：

研削時の発熱は低くなっていますが、
使用時はポイントを水に浸漬させたり、
濡らしたスポンジでジルコニアを
保持しながらご使用ください。

形態修正

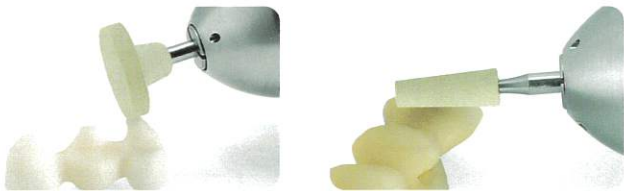

コース

| 品番 | DCB1CA-025 | DCB2CA-065 | DCB3CA-040 | DCB4CA-120 | DCB7CA-220 | DCB8CA-035 | DCB9CA-050 |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 作業長/厚み | 7.0 | 13.0 | 11.0 | 2.5 | 3.0 | 10.0 | 3.5 |
| 最大径 | 2.5 | 6.5 | 4.0 | 12.0 | 22.0 | 3.5 | 5.0 |
| 最高回転数 | 35,000 | 30,000 | 35,000 | 25,000 | 25,000 | 35,000 | 35,000 |
| 価格 | 4,300円 | 5,400円 | 4,800円 | 6,700円 | 10,200円 | 4,800円 | 4,800円 |

推奨回転数：毎分12,000回転

表面調整



メディアム

| 品番 | DCB1MA-025 | DCB2MA-048 | DCB2MA-065 | DCB3MA-040 | DCB4MA-120 | DCB5MA-220 | DCB6MA-120 |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 作業長/厚み | 7.0 | 13.0 | 13.0 | 11 | 2.5 | 2.0 | 6.8 |
| 最大径 | 2.5 | 4.8 | 6.5 | 4.0 | 12.0 | 22.0 | 12.0 |
| 適正回転数 | 35,000 | 30,000 | 30,000 | 35,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 価格 | 4,300円 | 4,800円 | 5,400円 | 4,800円 | 6,700円 | 7,600円 | 7,600円 |

推奨回転数：毎分12,000回転

コメットマルチセラミック・グラインダー 届出番号：27B2X00091000061 一般医療機器 歯科技工用ダイヤモンド研削材



製造販売元

株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪市天王寺区南河堀町6-35
TEL(06)6773-3333(代表)

東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東2-24-2 TEL(03)3835-2653(代)
九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂6-24-21 TEL(092)575-6060(代)

モモセ歯科商会



<https://www.momose-dm.co.jp>