

Debridement Series

デブライドメント用
シリーズ



New product features

●メンテナンス期、SPT期（歯周病安定期治療）の管理には、「口腔バイオフィルムの除去」が重要となります。また、デブライドメントの効果を最大限に発揮するには、器具の選択も重要です。細く繊細な先端形状のDBシリーズで、歯周組織に負担をかけず、低侵襲なデブライドメントを是非体感ください。

※強固な歯石への使用は破折の恐れがありますのでご注意ください。

DBI 探知からバイオフィルムの除去、薄い歯石の除去まで1本で全額対応可能です。

DBG メンテナンス～SPT期での、DBIでは取り切れない歯石の除去に有効です。

DBS 縁上歯石の除去、セメント除去にも有効です。

● デブライドメント用Gキュレット 丸柄



【臨床動画】

DBG

New product

● 短いハンドルで操作性が良く、
マイクロスコープを使用した
施術に有効です。

● 9.5mmの太めのハンドルで
安定した施術が可能です。

● 細いブレードが
メンテナンス期・SPT期の
引き締まった歯肉に有効です。

ブレード幅比較



est2 0.85mm
DBG 0.6mm
写真提供:鈴木 歩 歯科衛生士
(BRISTO DENTAL CLINIC 副院長)



【比較動画】

● 細いシャンクは適度な弾力があり歯石の探知が
しやすくオーバートリートメントを防ぎます。

シャンクの比較



5-6 G5 G6

コード No.09243
標準価格 4,800円

※ハンドルに「DBG」と刻印が
入っています。



7-8 G7 G8

コード No.09244
標準価格 4,800円



11-12 G11 G12


コード No.09246
標準価格 4,800円



13-14 G13 G14

コード No.09247
標準価格 4,800円

Gキュレット カラーチャート

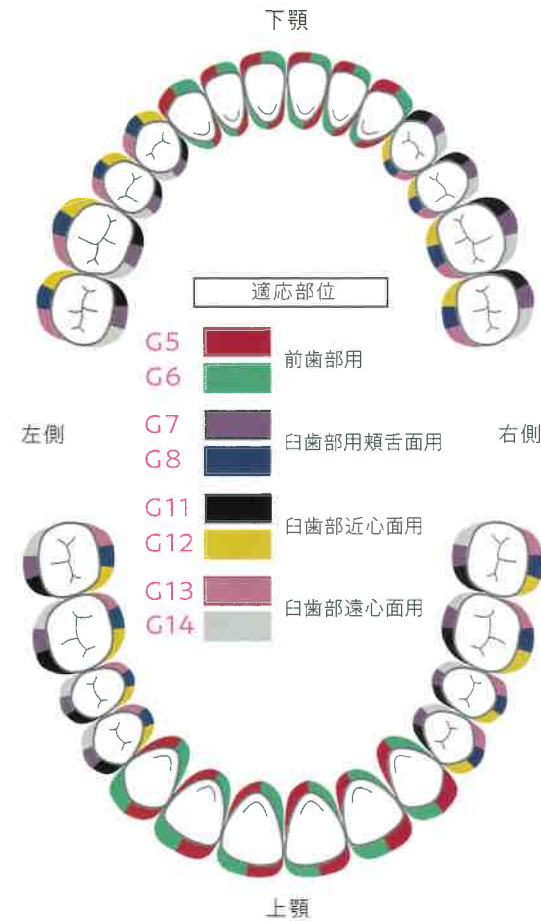

写真提供:林 智恵子 歯科衛生士
(ネクスト・デンタル)



写真提供:佐藤 昌美 歯科衛生士
(池田歯科クリニック)



写真提供:片山 童子 歯科衛生士
(片山塾主宰 プレミアムデンタルケア所属)



写真提供:塚田 智子 歯科衛生士
(あおいデンタルクリニック)



写真提供:延田 万里 歯科衛生士
(歯科・林 美穂 医院)



写真提供:萬田 久美子 歯科衛生士
(フリーランス)



写真提供:鈴木 歩 歯科衛生士
(BRISTO DENTAL CLINIC 副院長)



写真提供:塚原 桜 歯科衛生士
(麻布東京デンタルクリニック)

● デブライドメント用スケーラー



【臨床動画】


DBS

- グレーシーキュレット#11-12と同じ屈曲をしているため、白歯隣接面のスケーリングが容易です。
- 小さく薄いブレードが前歯歯頸部や歯間部のスケーリングに適しています。
- セメント除去にも有効です。

● ハンドル径/7.0mm



● サイズ/170mm

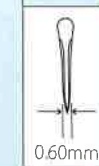

※先端幅/
0.60mm

11-12

コード No.09227
標準価格 4,400円

※ハンドルに「DBS」と刻印が入っています。



写真提供:長内 香織 歯科衛生士
(麻布東京デンタルクリニック)



写真提供:萬田 久美子 歯科衛生士
(フリーランス)

デブライドメント用インスツルメント



[臨床動画1] [臨床動画2]

DBI

- 歯周組織に負担なく挿入、繊細な操作が可能です。
- 歯面にフィットし、バイオフィルムを漏らさず除去します。
- 先端両側の角が鋭角すぎないため、補綴物を傷つけません。

● ハンドル径/5.0mm



● サイズ/180mm

11-12



コード No.09225 標準価格 4,000円

※ハンドルに「DB #11-12」と刻印が入っています。

※先端幅/
0.40mm

- 短いハンドルで操作性が良く、マイクロスコープを使用した施術に有効です。
- 9.5mmの太めのハンドルで安定した施術が可能です。

● ハンドル径/9.5mm



● サイズ/169mm

丸柄

11-12



コード No.09229 標準価格 4,800円

※ハンドルに「DB #11-12」と刻印が入っています。



写真提供:
尾野 誠先生
(四条烏丸歯科クリニック)



写真提供:
波多野 映子 歯科衛生士
(古畑歯科医院)



写真提供:
片山 章子 歯科衛生士
(片山塾主宰 プレミアムデンタルケア所属)



写真提供:
横田 美保 歯科衛生士
(本多歯科医院)



写真提供:
藤森 直子 歯科衛生士
(Team Grin'in Tokyo 代表取締役)

- 鋭利すぎないカッティングエッジがインプラントや補綴物を傷つけません。
- インプラント上部構造の基底部分にも有効です。

11-12 チタン製



コード No.09226 標準価格 5,800円



写真提供:
延田 万里 歯科衛生士
(歯科林 美穂医院)



写真提供:
長内 香織 歯科衛生士
(麻布東京デンタルクリニック)

丸柄

11-12 チタン製



コード No.09230 標準価格 6,600円

※ハンドルにカラーリングが付いています。※カラーリング/材質 Si 耐熱温度260℃
※ハンドルに「DB #11-12 Ti」と刻印が入っています。

医療機器届出番号 11B1X1000662D211

一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 デブライドメント用インスツルメント

DBI = デブライドメント用インスツルメント (Debridement Instrument)

【DBIの適応症】

- 柔らかいバイオフィルム
- 石灰化し始めた薄い歯石
- メインテナンス期の引き締まった歯肉

デブライドメント

バイオフィルム

DBI

- 繊細で歯周組織に負担をかけずに挿入、操作できます。
- 先端部の内面がフラットなためバイオフィルムを逃さずに効率よく除去できます。

Fit & Catch



先端幅 1/2

探針

- 繊細で探知力に優れていますが、先端部の断面が丸いため、バイオフィルムが逃げてしまい効率よく除去できません。



先端幅 1/2

Gキュレット

- 鋭いカッティングエッジでSRPに適していますが、オーバートリートメントに注意する必要があります。
- タイトな歯肉溝への挿入は歯周組織に負担がかかります。



刃幅 1

刃(先端)幅はGキュレットを基準にした割合です。

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

※掲載製品の標準価格は、2024年6月21日現在のものです。※標準価格に消費税は含まれておりません。

製造販売元 **株式会社YDM**

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006

問合先 デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991
http://www.ydm.co.jp/ E-mail ydm@ydm.co.jp

発売 **株式会社モリタ**

大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525

東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL03-3834-6161
http://www.dental-plaza.com/

株式会社マルヤマ歯科商店