

# 酸化ジルコニウムの接着に、 大きなプラス

特別価格  
キャンペーン

2024/ 7/22 (月) ~  
10/18 (金)迄

## Speedcem® Plus

セルフアドヒーシブ接着性レジンセメント  
スピードセム Plus

スピードセム Plusは、ジルコニアやメタルセラミックのような高強度修復物を天然歯やインプラントアバットメントに接着するための、接着性レジンセメントです。

スピードセム Plusは、デュアルキュア型セルフアドヒーシブセメントで、特に不透過な修復物をセメントで固定する際に、安定した接着を得られます。



## Ivoclean

修復物内面クリーニング液  
イボクリーン

酸化ジルコニウム修復物のクリーニングには、イボクリーン

口腔内試適で修復物の内面（接着面）に付着した唾液や血液を効果的に除去します。

特に、酸化ジルコニウムや卑金属合金は、接着力の低下を招くリン酸ではなく、イボクリーンで清掃することで、強固な接着をサポートします。



口腔内での使用はできません



パンフレットは  
こちらから

[https://www.ivoclar.com/ja\\_JP/CMS/brochures/SpeedCemPlus.pdf](https://www.ivoclar.com/ja_JP/CMS/brochures/SpeedCemPlus.pdf)

スピードセム PlusはMDPを含有しており、歯質や修復物(酸化ジルコニウムは卑金属合金)の前処理が不要です。

そのため、接着のステップを減らし操作中のエラーを軽減することができます。


## ステップ - 酸化ジルコニウムブリッジ



写真：Zenostar T bridge cemented onto natural abutment teeth: Dr Lukas Enggist, Dentist / Dominik Monreal, DT, Ivoclar Vivadent AG, 2014

## シェード

光透過性によって3種類をラインアップ。光透過性が2~3%の「オパーク」は、チタンアバットメントを使用したインプラント上部構造の接着に適しています。

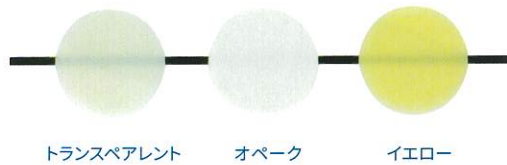

使用回数	13 ~ 18 歯(クラウンの場合)*
操作時間	1分間
硬化時間 (操作時間含む)	3分間 (化学重合の場合)
保管方法	2 ~ 8°C

\*シリンジ1本(9g)あたり

**特別価格【期間限定】2024年7月22日(月)~10月18日(金)**

## スピードセム Plus & イボクリン 特別価格キャンペーン

製品内容		用途/内容	単位	標準価格	注文数
681710WW	スピードセム Plus イエロー	ミキシングチップ ブラック 各15本、 ルートチャンネルチップ ブラック 各5本付属	9g×1	<del>16,000円</del>	
681711WW	スピードセム Plus オパーク		9g×1	<del>16,000円</del>	
681712WW	スピードセム Plus トランスペアレント		9g×1	<del>16,000円</del>	
637568AN	イボクリン	修復物内面クリーニング溶液	5g×1	<del>4,400円</del>	

(標準価格は税別です)

ご注文日 月 日

医院/ラボ名	ご住所		
TEL	FAX		
お取引商店様名 <b>株式会社マルヤマ歯科商店</b>	支店・営業所名	ご担当者	

製造販売元

Ivoclar Vivadent 株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷1丁目28番24号

TEL:03-6801-1301 FAX:03-5844-3657

ivoclar.com