

# ジェントルスティム

干渉電流型低周波治療器


摂食嚥下障害に対するリハビリテーションを干渉電流でサポート





痛みの少ない干渉波刺激が神経に作用し、  
 摂食嚥下障害に対するリハビリテーションをサポートします。  
 ポータブルな充電式のため持ち運びしやすく、  
 簡単シンプルな操作で電流の強さを調整できるので  
 どこでもすぐに治療ができます。

### 干渉波イメージ

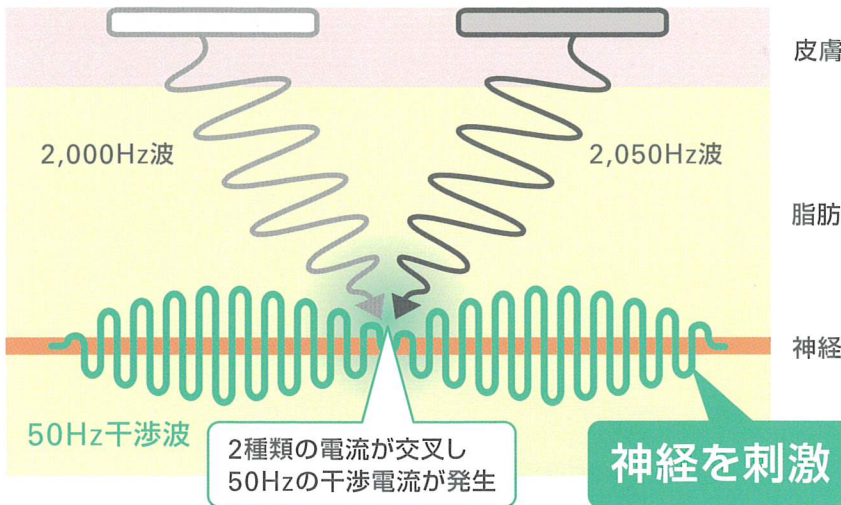

わかりやすい操作

タイマー機能 \*1

治療、リハビリの時間に合わせてタイマーを  
 セット。設定時間と残り時間が表示されます。

出力の調整 \*2

▲▼ボタンで調整します。見やすいレベル  
 インジゲータを表示します。

治療時の出力電流を表示 \*3

実際の出力の強さを確認しながらレベルの  
 調整ができます。

### ジェントルスティムの干渉波刺激

ジェントルスティムで採用している干渉波の周波帯域の電流では、皮膚抵抗が低くなり体表皮膚面での不快なビリビリ感が軽減できます。中周波電流は低周波電流と比較して皮膚深部まで到達する特徴があり、体内深部組織まで浸透します。

### 消耗品

ゲルパッド電極  
 押さえシート



ゲルパッド電極



### 商品構成

ACアダプタ



電極コード



治療器本体



充電台



## ジェントルスティム

仕様

出力電流：最大3.4mA (実効値)  
 出力周波数：2000Hz (干渉50Hz)  
 治療タイマー：5~30分  
 本体：W76×H160×D30mm  
 充電台：W87×H62×D192mm  
 本体：約250g  
 充電台：約160g  
 電氣的定格

本体 定格電源：DC3.6Vまで  
 消費電力：0.8 VA  
 充電台 定格電源：DC12V  
 消費電力：3VA  
 ACアダプタ 定格電源：AC100-240V,  
 50/60Hz, 0.29-0.16A  
 型番：MPU12A-105  
 定格出力：DC12V, 1A

標準価格 本体セット 300,000円 202740001

別売品

ゲルパッド電極 3パック 2,550円 202740005  
 ゲルパッド電極 押さえシート 3パック 1,350円 202740010  
 キャリングケース 6,000円 202740020



販売名 ジェントルスティム  
 一般的名称 干渉電流型低周波治療器  
 医療機器認証番号 227AHBZ00026000  
 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII) /  
 特定保守管理医療機器

●標準価格の後の9ケタの数字は品目コードです。●掲載商品の標準価格は、2019年7月22日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。

製造販売 カレイド株式会社 神奈川県相模原市緑区橋本4-19-16,OMGビル 〒252-0143  
 販売 株式会社 モリタ 大阪本社：大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒664-8650 T 06-6380-2525 東京本社：東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03-3834-6161  
 お問い合わせ お客様相談センター T 0800-222-8020(フリーコール)※歯科医療従事者様専用  
 www.dental-plaza.com