

お口の汚れを  
逃さずサツと

吸いとる吸引管。



誤嚥の心配がある患者さんに

ジェルと吸引管で  
水を使わない  
口腔ケア

口腔ケア用汚染物回収ツール

# 口腔ケア用吸引管

管理医療機器 医療機器認証番号：303ADBZX00005000 一般の名称：歯科用吸引管 製造販売元：日本歯科薬品株式会社


口腔ケア用吸引管は、適度に細い吸引口(一箇所)で、  
口腔内全体にアプローチしやすい形状を有した  
汚れを効率よく回収できるツールです。

## 製品特長


### 汚れを吸いとりやすく、詰まりにくい吸引口

14Fr.(内径Φ2.9mm、外径Φ4.7mm)

届きにくい箇所も  
ピンポイントで狙える長さ・角度

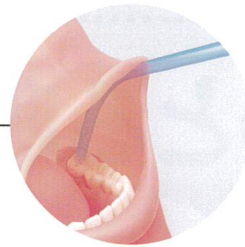

(原寸大)

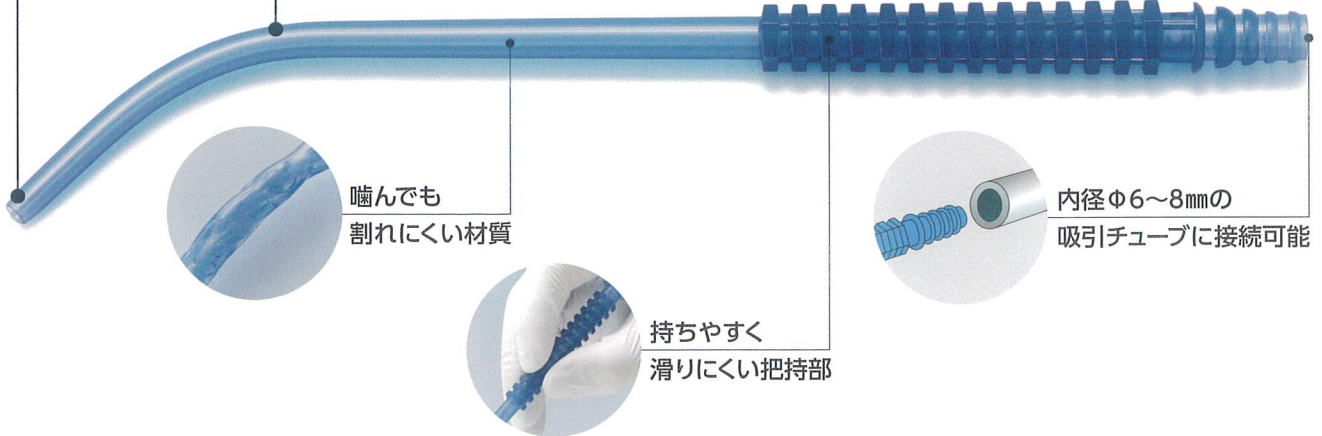


噛んでも  
割れにくい材質

内径Φ6~8mmの  
吸引チューブに接続可能


持ちやすく  
滑りにくい把持部

## 水を使わない口腔ケア (例)


塗り広げやすくてたれにくい「お口を洗うジェル」と一緒にご使用いただくことで、  
誤嚥の心配がある患者さんに「水を使わない口腔ケア」をおこなうことができます。

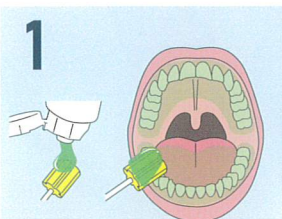

1  
口腔内全体に「お口を洗う  
ジェル」を適量塗布し、乾  
燥した汚れを軟化させます。

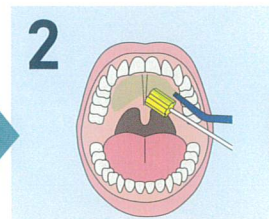

2  
汚れをからめとりながら、  
「口腔ケア用吸引管」を  
用いて吸い取ります。

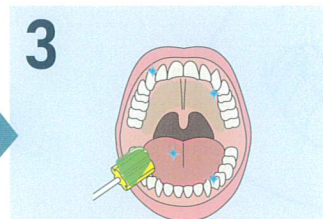

3  
ブラシ等で全体を清拭し、「お口  
を洗うジェル」を薄く塗布して保  
湿と粘膜ケアをおこないます。



包装	標準価格
20本入	2,900円(税別)

関連製品

口腔ケア用ジェル  
お口を洗うジェル  
ORAL WASH GEL

	希望小売価格
25g	680円(税別)
80g	1,500円(税別)

動画はこちらから



●販売店名

有限会社マルヤマ歯科商店

Nippon Shika Yakuhin Co., Ltd.